

FIBROSCOPI

CISTOSCOPIO / URETERORENOSCOPIO


IMMAGINE AD ALTA DEFINIZIONE



Oculare 40 x ad alta definizione



Dotati di componenti ottici eccellenti, i nostri fibroscopi offrono un'immagine luminosa e chiara con quasi 110 gradi di campo visivo. L'angolo di curvatura di up 200 ° down 120 ° garantisce una diagnosi accurata. Il canale operativo di diametro interno 2.2mm permette di effettuare biopsie, esami citologici, aspirazioni e altre operazioni diagnostiche o terapeutiche. Le eccellenti caratteristiche impermeabili permettono una disinfezione ad immersione rendendoli pratici e sicuri nell'utilizzo quotidiano.

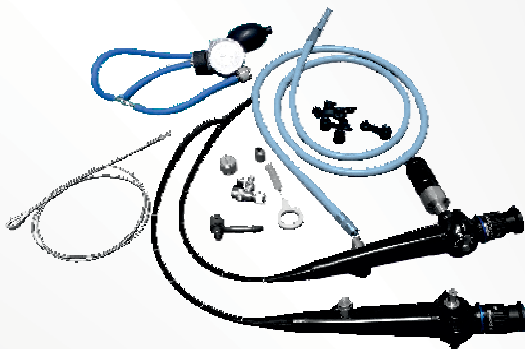

Forniamo una comoda valigetta con tutti gli accessori per un corretto e sicuro utilizzo.



La piena compatibilità con fonte luce allo xenon e sistemi video, rende possibile l'acquisizione di immagini per essere comodamente archiviate.

Cistoscopia flessibile FB-CY380 caratteristiche tecniche

Modello	FB-CY380
Campo visivo	110°
Lunghezza operativa	380mm
Diametro parte distale	Ø 4,9mm
Diametro esterno	Ø 5mm
Profondità campo visivo	3 - 50 mm
Diametro canale operativo	Ø 2,2mm
Angolazione distale	Up 200° Down 120°

Ureterorenoscopia flessibile URF700HA caratteristiche tecniche

Modello	URF700HA
Campo visivo	110°
Lunghezza operativa	700mm
Diametro parte distale	Ø 2,8mm
Diametro esterno	Ø 2,8mm
Profondità campo visivo	3 - 50 mm
Diametro canale operativo	Ø 1,2mm
Angolazione distale	Up 200° Down 120°

Endomed S.r.l.s.

Via appia lato Napoli, 220, I - 04023 Formia (LT)
www.endomed srl.com - info@endomed srl.com
tel. +39.0823.1656213 - fax + 39.0823.932337



Distribuito da: